



b.safe


Montage b.safe Waste Tube (Art.Nr. R 1410-06, -10, -15, -25)

Assembly b.safe Waste Tube (Art.No. R 1410-06, -10, -15, -25)

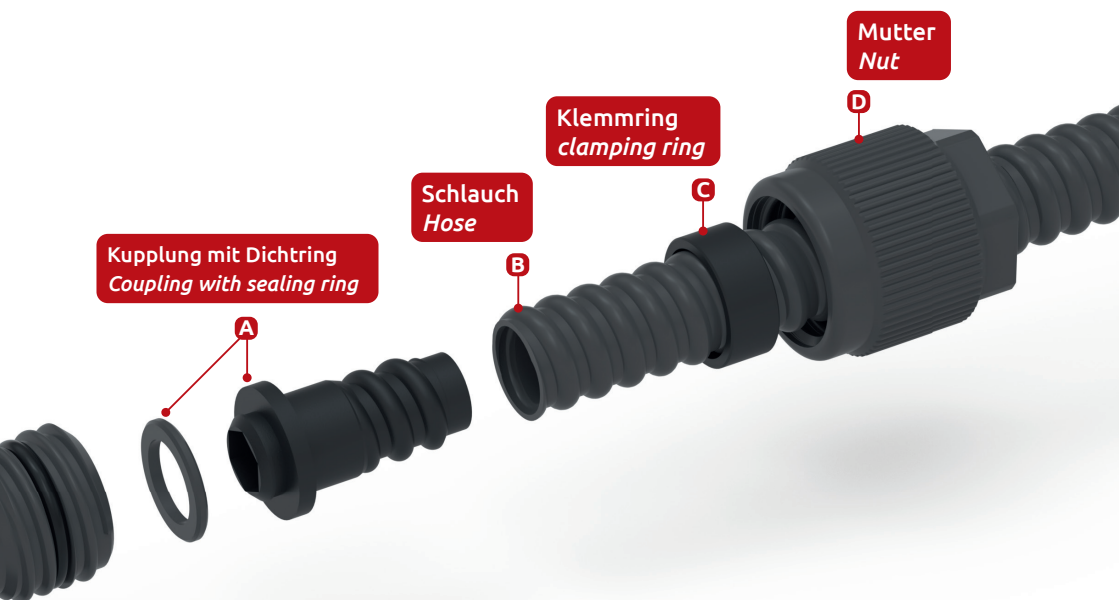


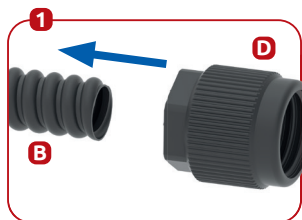

Mutter auf den Schlauch schieben
Push the nut onto the hose

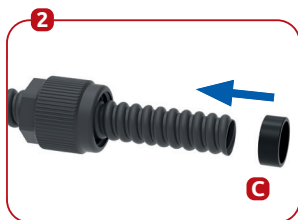


Symmetrischen Dichttring auf den Schlauch schieben
Slide the symmetrical sealing ring onto the hose

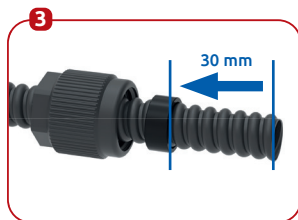

Mutter und Dichttring müssen mind. eine Kupplungs-länge weit (30 mm) auf den Schlauch geschoben werden
The nut and sealing ring must be pushed onto the hose at least one coupling length (30 mm)






Innensechskantschlüssel SW10 in die Kupplung einführen
Insert the hexagon wrench SW10 into the coupling

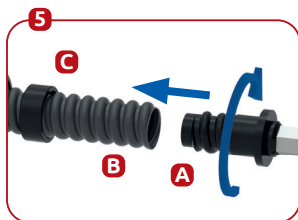


Kupplung in den Schlauch eindrehen
Screw the coupling into the hose



Kupplung ist bis zum Anschlag in den Schlauch gedreht
Coupling is screwed into the hose until it stops

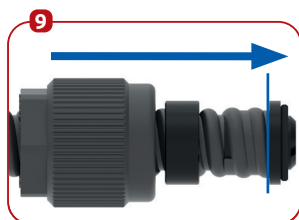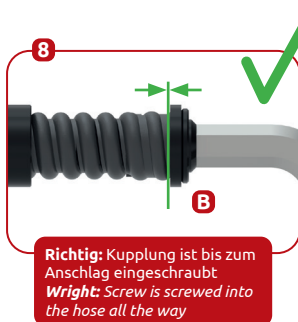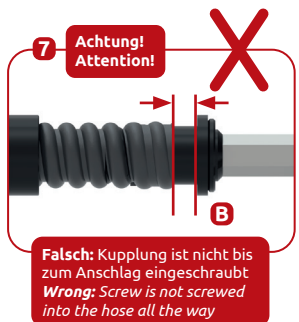

Mutter mit Schwung nach vorne ziehen, dabei wird der Klemmring nach vorne geschoben
Pull the nut energetic forward, thereby the clamping ring pushing forward

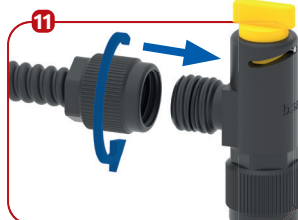

Mutter auf gewünschtes Produkt aufschrauben, z.B. Winkel-Absperrhahn
Screw the nut onto the desired product, e.g., Elbow Stopcock