



Bedienungsanleitung

Operating Instructions

Mode d'emploi

» Mini-Stand-Hygrometer

» Mini Hygrometer

» Mini Hygròmetre

SICCO Mini-Stand-Hygrometer, Artikelnummer: V 1829-08

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. LIEFERUMFANG	1
2. SICHERHEITSHINWEISE	1
3. FUNKTIONSHINWEISE	2



Bitte lesen Sie alle im folgenden aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Wir bitten dringend, die Hinweise für den Gebrauch und die Wartung zu beachten.

1. Lieferumfang

- 1 Stück SICCO Mini-Stand-Hygrometer
- 2 Batterien 1,5 V AAA
- 1 Bedienungsanleitung

2. Inbetriebnahme

» Nehmen Sie das Hygrometer und die Batterien vorsichtig aus der Verpackung.




» Öffnen Sie den Verschluss auf der Rückseite des Hygrometers.



» Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung. Entsprechende Symbole befinden sich im Batteriefach.



» Klipsen Sie den Verschluss vorsichtig wieder ein.

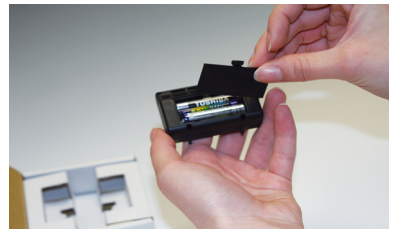

3. Funktionshinweise

Messbereich:	» Temperatur: 0 bis 50 °C » Luftfeuchtigkeit 1 – 99 % rel. Feuchte
Max. Messfehler:	» ± 1 °C bei 25 °C » ± 3 % rel. Feuchte bei 1 % bis 80 % » Wenn in Ihrem Exsikkator eine relative Luftfeuchtigkeit herrscht, welche kleiner als 1 % oder größer als 80 % ist, so können diese Werte von dem eingebauten Hygrometer nicht mehr richtig angezeigt werden. Verwenden Sie bitte hierfür ein höherwertiges Hygrometer.
Verlust der Messwertgenauigkeit:	» 0,2 °C in 4 Jahren » 1 % rel. Feuchte in 4 Jahren
Messintervall:	» 45 sek.
Anzeigeschritte:	» 1 °C » 1 %
Batterieanzeige:	» Das Hygrometer hat keine Ladungs- bzw. Batterieanzeige. Die LED-Anzeige im Display verblassst mit abnehmender Ladung der Batterien. Daher empfiehlt es sich, das Hygrometer in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und die Batterien ggf. auszutauschen.

SICCO Mini Hygrometer, Cat.-No.: V 1829-08

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Supplied with	3
2. Taking into operation	3
3. Functionality /Technical Information	4




Please read the information listed below thoroughly. We urgently ask you to observe the instructions about use and maintenance.

1. Supplied with

- 1 SICCO Mini Hygrometer
- 2 Batteries 1,5V AAA
- 1 operating instructions


2. Taking into operation

» Take out the hygrometer and the batteries carefully.

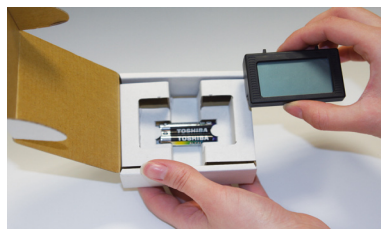

Sicco Mini Hygrometer


» Open the lid on the backside of the hygrometer.

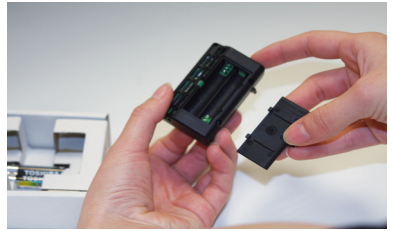

» While inserting the batteries pay attention to the polarity. Corresponding symbols are inside the battery case.



» Click the lid back into place.

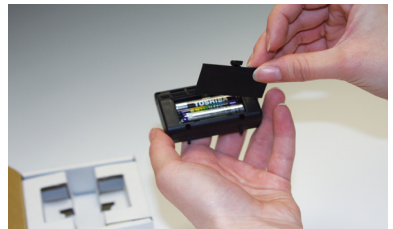

3. Functionality /Technical Information

Measuring range:	» Temperature: 0 to 50 °C » Humidity 1 – 99 % rel. humidity
Max. measuring error:	» ± 1 °C at 25 °C » ± 3 % rel. humidity at 1 % to 80 % » The mounted hygrometer cannot display any values or data if the relative inside humidity of the desiccator is less than 1 % or higher than 80 %. To display exact values, we recommend using a hygrometer of higher quality.
Sensor drift:	» 0,2 °C in 4 years » 1 % rel. humidity in 4 years
Measuring rate	» 45 sec.
Resolution:	» 1 °C » 1 %
Battery indicator:	» The hygrometer has no battery indicator. With decreasing battery power the intensity of the LED-display is reduced. Therefore we recommend to check the hygrometer regularly and, if necessary, exchange the batteries.

SICCO Mini Hygromètre, Réf.: V 1829-08

MODE D'EMPLOI

1. Volume de livraison	5
2. Mise en service	5
3. Mode de fonction / Spécifications	6



Veuillez lire précisément toutes les informations suivantes. Nous vous prions d'observer les indications sur usage et maintenance.

1. Volume de livraison

- 1 SICCO Mini Hygromètre
- 2 Batteries 1,5V AAA
- 1 Mode d'emploi


2. Mise en service

» Déballer le hygromètre et les batteries soigneusement.




Sicco Mini Hygromètre


» Ouvrez le bouchon au verso de l'hygromètre.

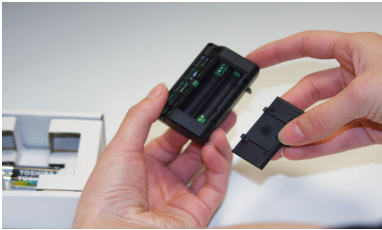

» Insérez les batteries et faites attention aux pôles. Les symboles correspondants se trouvent dans le compartiment pour pile.

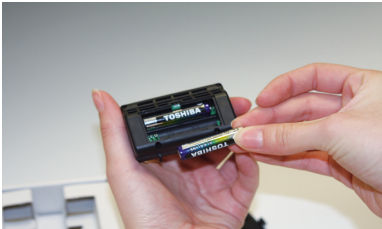

» Cliquez le bouchon dans le hygromètre.

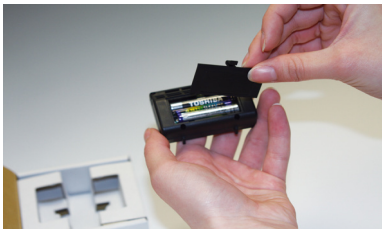

3. Mode de fonction / Spécifications

Zones de mesure:	» Température: 0 à 50 °C » Humidité 1 – 99 % humidité relative
Max. erreur de mesure:	» ± 1 °C à 25 °C » ± 3 % humidité relative à 1 % - 80 % » Le hygromètre assemblé ne peut pas afficher des valeurs ou données si l'humidité relative intérieure du dessiccateur est inférieure à 1 % ou supérieure à 80 %. Afin d'afficher des valeurs exactes, nous recommandons d'utiliser un hygromètre de haute qualité.
Perte de l'exactitude de la valeur mesurée:	» 0,2 °C dans 4 années » 1 % rel. humidité dans 4 années
Intervalle de mesurage:	» 45 sec.
Etapes affichées:	» 1 °C » 1 %
Indication de la statut de batterie:	» Le hygromètre n'a pas d'indication de la statut de batterie. L'affichage LED s'affaiblit quand les batteries sont à plat. C'est pourquoi nous vous recommandons de contrôler le hygromètre régulièrement et de l'échanger les batteries si nécessaire.



SICCO

EINE MARKE DER
BOHLENDER GmbH
Waltersberg 8
D 97947 Grünsfeld
Germany

Telefon: +49 (0) 93 46 - 92 86-0
Mail: info@sicco.de
www.sicco.de